

# v VARDIS

SWITZERLAND

BIOMIMETIC DENTAL SCIENCE

## CURODONT™ REPAIR

Guided Enamel Regeneration for the treatment of initial caries

Guided Enamel Regeneration für die Behandlung von Initialkaries

Régénération guidée de l'émail pour le traitement des débuts de caries

Rigenerazione guidata dello smalto per il trattamento delle lesioni cariose iniziali



CURODONT™ REPAIR from vVARDIS is the first biomimetic system for the treatment of initial caries by enamel regeneration:

- Patented, clinically proven *Monomer-Peptide 10* technology
- Initiates enamel regeneration at the depth of the lesion
- Between 86% to 100% inactivation and regression of initial carious lesions
- Non-invasive, painless and easy to use
- Suitable for all patients, including children

CURODONT™ REPAIR von vVARDIS ist das erste biomimetische System zur Behandlung früher Kariesläsionen durch Regeneration des Zahnschmelzes:

- Patentierte, klinisch-bestätigte *Monomer-Peptid* Technologie
- Leitet eine Zahnschmelzregeneration in der Tiefe der Läsion ein
- Zwischen 86% und 100% Inaktivierung und Regression der frühen Kariesläsionen
- Nichtinvasive, schmerzlose und einfache Anwendung
- Geeignet für alle Patienten, inklusive Kinder

Fabriqué par vVARDIS, CURODONT™ REPAIR est le premier système biomimétique pour le traitement des débuts de caries par régénération de l'émail:

- Technologie *Monomère-Peptide 10* brevetée et validée par la pratique clinique
- Amorce la régénération de l'émail dans la profondeur de la lésion
- Entre 86% et 100% d'inactivation et de régression des lésions carieuses initiales
- Non invasif, indolore et facile à utiliser
- Convient à tous les patients, y compris aux enfants

vVARDIS CURODONT™ REPAIR è il primo sistema biomimetico per il trattamento delle lesioni cariose iniziali attraverso la rigenerazione guidata dello smalto:

- Tecnologia brevettata e clinicamente testata: *Monomer-Peptide 10*
- Permette la rigenerazione dello smalto a partire dalla profondità della lesione
- Rende possibile l'inattivazione tra l'86% e il 100% delle lesioni cariose iniziali
- Non invasivo, indolore ed estremamente facile da usare
- Adatto ai pazienti di ogni età, compresi i bambini

C210213

professional.vardis.com

## APPLICATION (5-8 MINUTES)

Treatment by dental hygienist or dentist

- Professional tooth cleaning
- Cleaning of the affected tooth surface with 2% sodium hypochlorite for 20 sec.
- Application of 35-37% orthophosphoric acid to the area in question for 20 sec.
- Rinse and dry gently
- Application of CURODONT™ REPAIR

Behandlung von DH oder ZaZ

- Professionelle Zahnreinigung
- Reinigen mit Natriumhypochlorit 2% der betroffenen Zahnoberfläche (20 Sek)
- Schmelzätzung mit Phosphorsäuregel 35% (20 Sek.)
- Spülen und trocknen
- CURODONT™ REPAIR auftragen


Traitement par une hygiéniste dentaire ou une dentiste

- Nettoyage professionnel des dents
- Nettoyage de la surface de la dent affectée avec de l'hypochlorite de sodium à 2 % pendant 20 sec.
- Application d'acide orthophosphorique à 35 % pendant 20 sec.
- Rinçage et séchage
- Application de CURODONT™ REPAIR


Trattamento effettuato da un'igienista dentale o un dentista

- Pulizia professionale del dente interessato
- Trattamento della superficie interessata con ipoclorito di sodio al 2% per 20 sec.
- Applicazione di acido ortofosforico al 35-37% sull'area interessata per 20 sec.
- Risciacquo e leggera asciugatura
- Applicazione di CURODONT™ REPAIR


## INDICATIONS

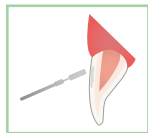

Buccal/Lingual Caries

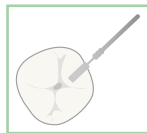

Occlusal Caries

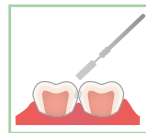

Interproximal Caries

1 applicator of CURODONT™ REPAIR can treat up to 1-3 initial carious lesions

- Initial approximal caries D1, D2, (D3, non-cavitated)
- Initial occlusal caries
- Initial smooth surface caries
- Initial caries in deciduous teeth

1 Applikation von CURODONT™ REPAIR kann 1-3 frühe Kariesläsionen behandeln

- Initiale Approximalkaries D1, D2, (D3, nicht kavitiert)
- Initiale Okklusalkaries
- Glättflächenkaries
- Initiale Milchzahnkaries

1 applicateur de CURODONT™ REPAIR permet de traiter entre 1 et 3 débuts de lésions carieuses

- Début de carie approximale D1, D2, (D3 sans cavitation)
- Début de carie occlusale
- Début de carie de surface lisse
- Début de carie de dent de lait

Un'applicazione di CURODONT™ REPAIR può trattare da 1 a 3 lesioni cariose iniziali

- Lesioni approssimali iniziali D1, D2, (D3, non cavitata)
- Lesioni occlusali iniziali
- Lesioni iniziali della superficie
- Lesioni iniziali nei denti decidui

## PRECAUTIONS

CURODONT™ REPAIR should only be used by dental professionals

CURODONT™ REPAIR darf nur durch Fachpersonal verwendet werden

CURODONT™ REPAIR ne doit être utilisé que par des professionnels

CURODONT™ REPAIR deve essere utilizzato esclusivamente da personale qualificato